



## Scirocco plus<sup>+</sup> - Scirocco

The brand new *Scirocco plus<sup>+</sup>* and *Scirocco* range of Podiatry Units express an elegant and minimal design while guaranteeing the highest quality of materials and innovative technology that ensure maximum ergonomic work flow to the Operator during medical treatments.

### Main features:

- Touch Screen control panel enables the Operator to control Unit and Chair.
- Steel structure painted with epoxy powder.
- CORIAN® worktop
- Drawers with recirculating ball slide guides and servo-assisted locking system
- Wide choice of polycarbonate interior instruments trays for drawers
- Metal drawers compartment with painted drawer front panels and stainless steel handles to choose among BTC range
- Solid 4mm thick steel structure for the maximum stability equipped with 4 pivoting castors. The front castors are equipped with manual lock system
- Storage Compartment 35cm wide
- Bottle tank for distilled water for the spray function on syringe and M/M.

*Scirocco* control panel is fixed on the unit by a wide hiké arm-support that provides the Operator with the maximum freedom of movement.

*Scirocco plus<sup>+</sup>* is equipped with a motorized arm that can electrically move up/down with a 150mm vertical excursion, allowing the Operator to move the Instruments Tablet at the chosen height and position.

Note: *Scirocco plus<sup>+</sup>* and *Scirocco* also available with "Elegance" hanging hose tablet

*La nouvelle gamme d'Unités Scirocco exprime un design élégant et minimal tout en garantissant la plus haute qualité des matériaux et une technologie innovante, qui assure le maximum d'ergonomie à l'Opérateur lors des traitements médicaux.*

### Caractéristiques principales:

- Panneau de commande à écran tactile, permet à l'Opérateur de contrôler l'unité et le fauteuil.
- Structure en acier peint avec poudre époxy.
- Plan de travail en CORIAN®
- Tiroirs avec système de fermeture asservi.
- Ample choix de plateaux de rangement en polycarbonate pour tiroirs
- Élement de rangement avec façades des tiroirs peints. Couleurs à choisir parmi la gamme BTC
- structure en acier 4 mm d'épaisseur pour le maximum de stabilité équipée de 4 roulettes pivotantes. Les roulettes avant sont équipées d'un système d'arrêt manuel
- Porte de 35 cm de large pour systèmes d'aspirateur/comresseur intégrés
- Bouteille de réservoir pour l'eau distillée pour la fonction spray de support pour la seringue et le micromoteur.

*Le panneau de commande du Scirocco est fixé à l'Unité par un bras de support qui fournit à l'Opérateur le maximum de liberté de mouvement.*

*Scirocco plus<sup>+</sup> est équipé d'un bras motorisé réglable vers le haut et le bas avec une excursion verticale de 150 mm, permettant à l'opérateur de déplacer la tablette d'instruments à la hauteur et à la position souhaitées.*

*Note: Scirocco plus<sup>+</sup> et Scirocco également disponibles en version "Elegance" cordons pendants*

*La nuova gamma di Unità podologiche Scirocco esprime un design elegante e moderno, che assicura la massima qualità nei materiali e vanta una tecnologia innovativa, in grado di garantire la massima ergonomia all'Operatore durante l'esecuzione di ogni trattamento professionale.*

### Caratteristiche principali:

- Pannello di controllo Touch Screen che consente all'Operatore di controllare le funzionalità sia dell'Unità podologica che della Poltrona
- Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Piano di lavoro in CORIAN®
- Cassetti con sistema di chiusura assistita
- Ampia scelta di interni cassetto in policarbonato
- Mobile con frontal cassetto verniciati nei colori a scelta della gamma BTC
- Struttura in acciaio con spessore di 4 mm per la massima stabilità, dotata di 4 ruote pivotanti. Le ruote anteriori sono dotate di un sistema di bloccaggio manuale
- Anta con ampiezza di 35 cm per accogliere il sistema di aspirazione / compressore integrato
- Serbatoio per acqua distillata necessario per sostenere la funzione spray della siringa e del micromotore.

Il pannello di controllo segue ergonomicamente ogni movimentazione, tramite il braccio di supporto, offrendo all'Operatore la massima operatività. L'Unità podologica *Scirocco plus<sup>+</sup>* può essere dotata di un braccio motorizzato regolabile elettronicamente, con un'escursione verticale di 150 mm, permettendo all'Operatore di posizionare la tavoletta strumenti all'altezza desiderata.

*Note: Scirocco plus<sup>+</sup> e Scirocco sono disponibili anche nella versione "Elegance" con tavoletta strumenti con cordoni a recupero superiore.*



## Scirocco plus<sup>+</sup>



# Scirocco plus<sup>+</sup>

## PODIATRY UNITS

code	description
9210191-C-A	SCIROCCO PLUS Classic
9210191-E-A	SCIROCCO PLUS Elegance



80 colours available

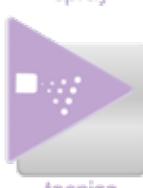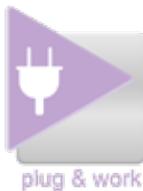



# Scirocco

code	description
9210181-C-A	SCIROCCO Classic
9210181-E-A	SCIROCCO Elegance

PODIATRY UNITS



80 colours available

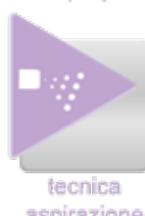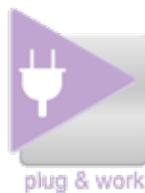

# Scirocco plus+ - Scirocco

## PODIATRY UNITS



CORIAN® worktop for easy disinfection.  
**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*Plan de travail en CORIAN® pour une désinfection simple et efficace.*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**

Il piano di lavoro in CORIAN® garantisce una disinfezione semplice ed efficace.

**FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD**




Steel cabinet equipped with 4 drawers. Push-pull slides with stabilizer bar and drawer fronts in color at choice.  
**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*Meuble en acier à 4 tiroirs. Glissières push-pull avec barre stabilisatrice et façades de tiroirs de couleur à choix.*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**

Mobile in acciaio con 4 cassetti (frontali in acciaio verniciati). Guide Push-Pull con barra di stabilizzazione.

**FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD**

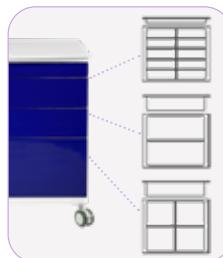

The first drawer can be equipped with UV LEDs for the germicidal function.  
U-V LED Light (60 led/m strip), 365nm wavelength.  
**OPTIONAL**

*Le premier tiroir peut être équipé de LED UV à fonction germicide.  
Lumière LED ultraviolette (bande de 60 led/m), longueur d'onde 365nm.*

**EN OPTION**

Il primo cassetto può essere dotato di led UV con funzione germicida.  
Luce LED ultravioletta (striscia con 60 led/m), lunghezza d'onda 365nm.

**OPZIONALE**

code	description
9210872	LED UV



### HANGING HOSES

Version: CLASSIC

The tablet houses up to 4 rotary instruments.

Instruments with hanging hoses and high resistance acetal resin support.  
**PROVIDED IN THE CLASSIC VERSION**

### TABLETTE DES INSTRUMENTS

Vérsion: CLASSIC

*La tablette est prédisposée jusqu'à 4 instruments rotatifs. Instruments à cordons pendants et support en résine acétal de haute résistance.*

**FOURNI DANS LA VERSION CLASSIC**

### TAVOLETTA DEGLI STRUMENTI

Versione: CLASSIC

La tavoletta strumenti è predisposta fino ad un massimo di 4 strumenti dinamici. Strumenti con tubi pendenti e supporto in resina acetalica ad alta resistenza.

**FORNITO NELLA VERSIONE CLASSIC**



### INSTRUMENTS TABLET

Vérsion: ELEGANCE

The tablet houses up to 4 rotary instruments. S.P.R.I.D.O. ergonomic system.  
**PROVIDED IN THE ELEGANCE VERSION**

### TABLETTE DES INSTRUMENTS

Vérsion: ELEGANCE

*La tablette est prédisposée jusqu'à 4 instruments rotatifs.*

*Système ergonomique S.P.R.I.D.O.*

**FOURNI DANS LA VERSION ELEGANCE**

### TAVOLETTA DEGLI STRUMENTI

Versione: ELEGANCE

La tavoletta strumenti è predisposta fino ad un massimo di 4 strumenti dinamici.

Sistema ergonomico S.P.R.I.D.O. con bracci a recupero superiore.

**FORNITO NELLA VERSIONE ELEGANCE**



#### Unit's display

Panel control for all functions of the Unit and rotary instruments.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

#### Ecran de l'Unité

Contrôle de toutes les fonctions de l'Unité et des instruments rotatifs.

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**

Display Touch Screen schermata Riunito: consente all'Operatore di gestire tutte le funzioni del Riunito e degli strumenti dinamici.

**FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD**

Chair display: the Operator can run all the movements of the Chair.

3 memorizable positions and Zero position.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*Ecran du Fauteuil: permet à l'Opérateur de gérer tous les mouvements du fauteuil, ainsi que*

*les 3 positions mémorizables et la remise à zéro.*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**

Display Touch Screen schermata Poltrona: consente all'Operatore di gestire tutti i movimenti della poltrona, nonché le 3 posizioni memorizzabili ed il ritorno a zero.

**FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD**



In *Scirocco plus*<sup>+</sup> version of *Scirocco* Unit the support arm of the instruments tablet can move on the vertical plane of 150 mm by means of a linear actuator to provide the Operator with perfect ergonomics.

**PROVIDED IN THE PLUS VERSION**

90° left and right rotation of the instruments tablet for the highest ergonomics.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*Rotation de 90° gauche et droite de la tablette d'instruments, pour le maximum d'ergonomie.*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**

Rotazione della tavoletta strumenti a sinistra e a destra di 90° per la massima ergonomia.

**FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD**

La versione con braccio di supporto motorizzato consente il movimento della tavoletta strumenti sul piano verticale di 150 mm azionato da un attuatore lineare, garantendo all'Operatore una perfetta ergonomia.

**FORNITO NELLA VERSIONE PLUS**

### TECHNICAL SPRAY

The Unit must be completed by:

- a micromotor
- a handpiece
- a compressor (integrated or external)



tecnica spray



manipolo con luce



code	description
9210557 (C)	M/M GHIBLI
9210558 (E)	M/M GHIBLI

#### M/M GHIBLI

LED light source (lifetime more than 50.000 h). Brushless (no maintenance required). Warranty by BTC 24 months. Max speed 40.000 rpm. ISO joint for hand-piece and contra-angle.

**OPTIONAL**

#### M/M GHIBLI

Eclairage LED (durée de vie supérieure à 50.000 h). Sans charbons (aucun entretien requis). Garantie BTC 24 mois. Vitesse maximum 40.000 tr / min. Connection ISO pour pièce à main et contre-angle.

**EN OPTION**

#### M/M GHIBLI

Predisposizione per micromotore a LED GHIBLI (durata superiore a 50.000 ore). Brushless (nessuna manutenzione richiesta). 24 mesi di garanzia BTC. Velocità massima 40.000 rpm. Connessione ISO per manipolo e contrangolo.

**OPZIONALE**



code	description
3490117	HAND-PIECE NSK NO FO
3490156	HAND-PIECE NSK WITH FO

#### HAND- PIECE NSK

Handpiece 1:1 single spray. Maximum speed 40.000 r/pm  
**OPTIONAL**

#### PIECE A MAIN NSK

Pièce à main 1:1, spray unique. Vitesse maximale 40 000 tr/min  
**EN OPTION**

#### MANIPOLO NSK

Manipolo dritto con rapporto 1:1, spray singolo. Velocità max. 40.000 rpm  
**OPZIONALE**



manipolo con luce

### TECHNIQUE SPRAY

L'Unité doit être complétée par :

- un micromoteur
- une pièce à main
- un compresseur (intégré ou externe)

### TECNICA SPRAY

Il Riunito deve essere completato con:

- un micromotore
- un manipolo
- un compressore (integrato o esterno)



tecnica spray

manipolo con luce



code	description	code	description
9210526 (C)	M/M MCX BIEN AIR NO FO	9210527 (C)	M/M MCX BIEN AIR WITH FO
9210524 (E)	M/M MCX BIEN AIR NO FO	9210525 (E)	M/M MCX BIEN AIR WITH FO

#### M/M MCX

Easy to disinfect and clean in autoclave. High power Micro-series joint. Max speed 40.000 rpm. Few maintenance, vibration-free at lower speed. ISO connection. LED light OPTIONAL.

**OPTIONAL**

#### M/M MCX

Simple à désinfecter et à nettoyer en autoclave. Connection Micro-série de haute puissance. Vitesse maximum 40.000 tr / min. Pas de maintenance requise. Sans vibrations à basse vitesse. Connexion ISO. Éclairage LED - EN OPTION.

**EN OPTION**

#### M/M MCX

Predisposizione per micromotore MCX Facile da disinfezionare e autoclavare. Connessione micro-serie di alta potenza. Velocità massima 40.000 rpm. Nessuna manutenzione richiesta. Nessuna vibrazione a bassa velocità. Connessione ISO. Illuminazione a LED - IN OPZIONE.

**OPZIONALE**



code	description
3490131	HAND-PIECE MICRO



code	description
3490660	HAND-PIECE QUARK NO FO
3490662	HAND-PIECE QUARK WITH FO

#### HAND- PIECE MICRO

PM 1:1 is designed to withstand the stresses resulting from repeated lateral pressure, while maintaining exceptional precision.  
**OPTIONAL**

#### PIECE A MAIN MICRO

PM 1:1 est conçu pour résister aux contraintes résultant de la pression latérale répétée, tandis que maintenir une précision exceptionnelle.  
**EN OPTION**

#### MANIPOLO MICRO

PM 1:1 è progettato per resistere alle sollecitazioni derivanti da ripetute pressioni laterali, pur mantenendo un'eccellente precisione..  
**OPZIONALE**

#### HAND- PIECE QUARK

40.000 rpm 1:1  
Sterilizable  
Integrated Spray  
**OPTIONAL**

#### PIECE A MAIN QUARK

40.000 tr / min 1:1  
Stérilisable  
Spray intégré  
**EN OPTION**

#### MANIPOLO QUARK

40.000 rpm 1:1  
Sterilizzabile  
Spray integrato  
**OPZIONALE**



manipolo con luce



code                    description  
9210456            INTEGRATED C70 COMPRESSOR



code                    description  
3270310            COMPRESSOR TOP AIR

#### **INTEGRATED C70 COMPRESSOR**

Compressor integrated inside the technical compartment. Provides the necessary air to the dental unit. Flow rate 70 l/min.

**OPTIONAL**

#### **COMPRESSEUR INTÉGRÉ C70**

Compresseur intégré à l'intérieur du compartiment technique. Fournit l'air nécessaire à l'unit dentaire. Débit 70 l/min.

**EN OPTION**

#### **COMPRESSORE INTEGRATO C70**

Compressore integrato all'interno del vano tecnico. Fornisce l'aria necessaria al riunite per il funzionamento di un micromotore, una turbina e della siringa. Portata d'aria 70 l/min.

**OPZIONALE**

Dry Compressor (oil free) with 6 litres tank. Air flow 90 l/min, pressure 7 bar.

Noise: 58dB

**OPTIONAL**

Compresseur sec (sans huile) avec réservoir de 6 litres. Débit d'air 90 l/min, pression 7 bar. Bruit : 58 dB

**EN OPTION**

Compressore a secco (oil free) con serbatoio da 6 litri. Portata d'aria 90 l/min, pressione 7 bar. Rumorosità: 58 dB

**OPZIONALE**



code                    description  
3270312            EXTERNAL OIL COMPRESSOR



code                    description  
3270311            EXTERNAL OIL COMPRESSOR

Silent Oil Compressor with double cylinder and 24 litres tank. Air flow 37 l/min, pressure 8 bar. Noise: 40dB

**OPTIONAL**

Compresseur d'huile silencieux avec double cylindre et réservoir de 24 l. Débit d'air 37 l/min, pression 8 bars. Bruit : 40 dB

**EN OPTION**

Compressore silenzioso a olio con doppio cilindro e serbatoio 24 l. Portata d'aria 37 l/min, pressione 8 bar. Rumorosità: 40 dB

**OPZIONALE**

Silent Oil Compressor with 24 litres tank. Air flow 37 l/min, pressure 8 bar. Noise: 40dB

**OPTIONAL**

Compresseur à huile silencieux avec réservoir de 24 l. Débit d'air 37 l/min, pression 8 bar. Bruit : 40 dB

**EN OPTION**

Compressore silenzioso a olio con serbatoio 24 l. Portata d'aria 37 l/min, pressione 8 bar. Rumorosità: 40 dB

**OPZIONALE**



code	description
9210510 (C)	M/M BTC AIR
9210509 (E)	M/M BTC AIR

#### M/M BTC AIR

Brushless motor. Maximum speed 40,000 rpm.  
Handpiece integrated into suction system.

#### OPTIONAL

#### M/M BTC AIR

*Moteur sans charbons. Vitesse maximum 40 000 tr / min.  
Pièce à main intégrée dans le système d'aspiration.*

#### EN OPTION

#### M/M BTC AIR

Micromotore Brushless. Rotazione max 40 000 rpm.  
Manipolo integrato per sistema di aspirazione.

#### OPZIONALE



code	description
9210515 (C)	M/M E-TYPE
9210516 (E)	M/M E-TYPE

#### E-TYPE MICROMOTOR

Self-ventilated motor. Maximum speed 35,000 rpm. ISO connection for straight and contra-angle handpieces.

#### OPTIONAL

#### MICROMOTEUR E-TYPE

*Moteur auto-ventilé. Vitesse maximale 35.000 tr/min. Connexion ISO pour pièces à main droites et contre-angles.*

#### EN OPTION

#### MICROMOTORE E-TYPE

Motore auto ventilato. Velocità max 35.000 rpm.  
Attacco ISO per manipoli diritti e contrangoli.

#### OPZIONALE



code	description
3170163	HAND-PIECE AT STRAIGHT

#### HAND-PIECE AT STRAIGHT OPTIONAL

#### PIECE A MAIN AT STRAIGHT EN OPTION

#### MANIPOLO AT STRAIGHT OPZIONALE

#### TECHNIQUE WITH ASPIRATION

The Unit must be completed by:

- a micromotor
- a handpiece (not necessary if equipped with BTC AIR)
- an integrated or external suction engine

#### TECHNIQUE AVEC ASPIRATION


L'Unité doit être complétée par :

- un micromoteur
- une pièce à main (pas nécessaire avec BTC AIR)
- un aspirateur intégré ou externe

#### TECNICA ASPIRAZIONE

Il Riunito deve essere completato con:

- un micromotore
- un manipolo (non necessario con BTC AIR)
- un aspiratore (integriato o esterno)

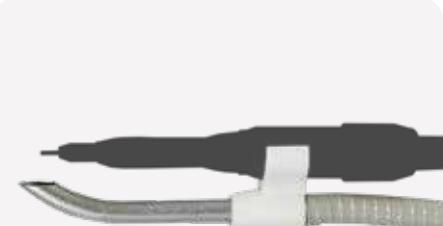

code	description
9210536 (C)	SUCTION SYSTEM INTEGRATED
9210532 (E)	SUCTION SYSTEM INTEGRATED

Suction system integrated in the Unit, self-cleaning timed system and coaxial canula.

#### OPTIONAL

*Système d'aspiration intégré. Système temporisé autonettoyant et canule coaxiale.*

#### EN OPTION

Condotto di aspirazione integrato al riunito, con sistema temporizzato autopulente e cannula applicabile a tutti i tipi di manipoli.

#### OPZIONALE



Brushless suction engine LONG LIFE integrated inside the cabinet.  
Suction Motor developed with the latest and innovative technical solutions: the motor is an induction (brushless) and the thermostat protection prevents overheating, the integrated soundproofing prevents loud noise. 1.100 l/min air-flow  
**OPTIONAL**

*Moteur d'aspiration sans charbons LONG LIFE intégré à l'intérieur du tiroir de l'élément de rangement. Aspirateur conçu avec les concepts techniques les plus modernes : le moteur est à induction et le thermostat de protection empêche toute surchauffe, un filtre antibruit intégré empêche l'émission de bruit élevé. 1.100 l/m flux d'air*

**EN OPTION**

Aspiratore integrato con motore brushless Long Life e contenitore polveri. Da inserire nel vano tecnico. Aspiratore progettato con i più moderni concetti tecnici: il motore è a induzione e il termostato di protezione preserva eventuali surriscaldamenti, un filtro antirumore incorporato preserva dall'emissione di rumore. Portata d'aria: 1.100 l/min.

**OPZIONALE**



#### SUCTION ENGINE SPARE PARTS

code	description
3500110	FILTER BAGS (4 PCS.)



3-function syringe: air, water and spray  
The tip and the handle are easily removable to ensure a perfect disinfection and sterilization in autoclave (135 °)  
**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

**Seringue 3 fonctions: air, eau et spray**

*L'embout et la poignée sont facilement amovibles afin de garantir une désinfection et une stérilisation parfaites en autoclave (135 °)*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**

Siringa a 3 funzioni: aria, acqua e spray

La punta e l'impugnatura sono facilmente smontabili per assicurare una perfetta disinfezione e sterilizzazione in autoclave (135°).

**FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD**

Le foto mostrano la siringa a 3 funzioni e la punta a spruzzo, entrambi con le loro parti rimovibili per una pulizia e sterilizzazione efficaci.



Brushless suction engine LONG LIFE.  
**OPTIONAL**


*Moteur d'aspiration sans charbons LONG LIFE.*  
**EN OPTION**

*Motore di aspirazione brushless carenato LONG LIFE.*  
**OPZIONALE**



#### SUCTION ENGINE SPARE PARTS

code	description
3170170	FILTER BAGS (4 PCS.)

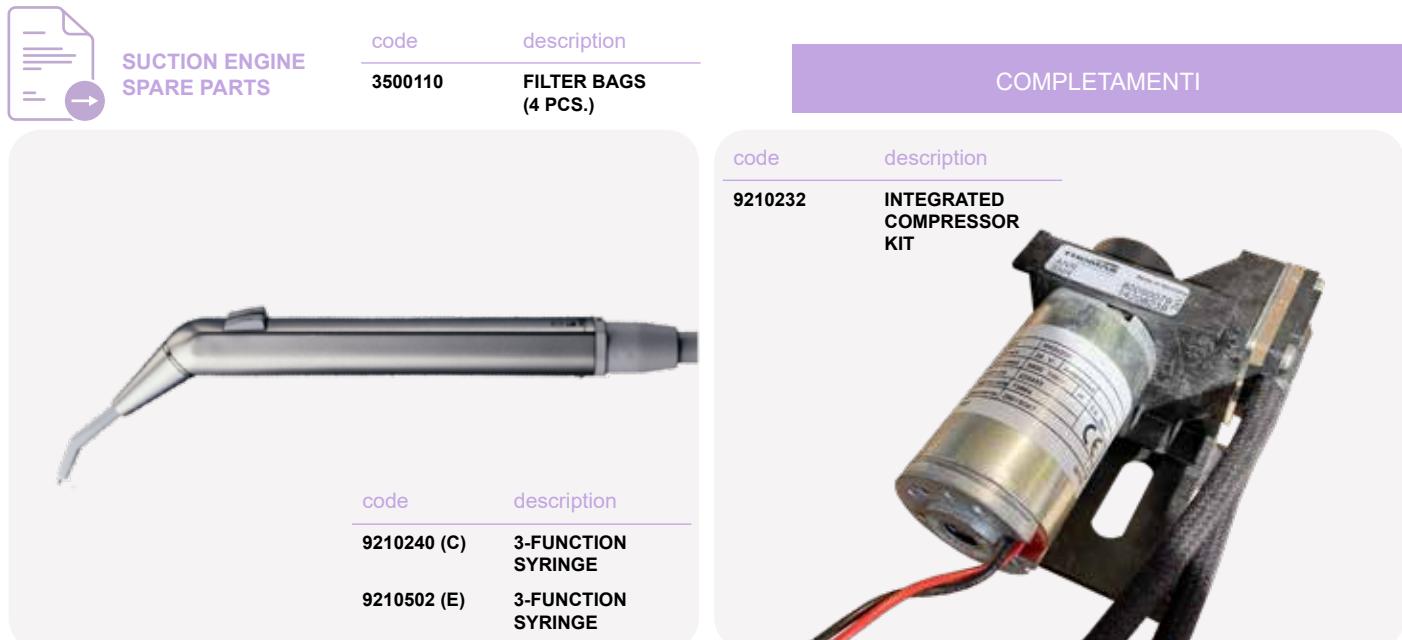

The integrated compressor kit provides the air necessary for the 3 functions syringe.

**OPTIONAL**

*--> Not necessary if you have already chosen a compressor for the Spray technique. To be added if the Aspi technique has been chosen.*

*Le kit du compresseur intégré fournit l'air nécessaire pour la séringue à 3 fonctions.*

**EN OPTION**

*--> Pas nécessaire si vous avez déjà choisi un compresseur pour la technique Spray. A ajouter si la technique Aspi a été choisie.*

Fornisce l'aria necessaria per pressurizzare l'acqua e produrre lo spray della siringa 3 funzioni.

**OPZIONALE**

*--> Non necessario se si è già scelto un compressore per la tecnica Spray. Da aggiungere, se si è scelto la tecnica Aspi.*



code	description
3620146	BRAVIA L

**BRAVIA L**

High speed turbine equipped with ceramic ball bearings, triple spray, bright lighting and ergonomic structure. Easy to clean surface.

**OPTIONAL**

**BRAVIA L**

Turbine à haute vitesse avec roulements à billes en céramique, triple spray, éclairage lumineux et efficace, structure ergonomique avec une surface simple à nettoyer.

**EN OPTION**

**BRAVIA L**

Turbina ad alta velocità con speciali cuscinetti a sfere in ceramica, triplo getto spray, illuminazione brillante e efficiente, corpo ergonomico con superficie facile da pulire.

**OPZIONALE**



code	description
3620148	THALIA

**THALIA**

Single spray and high torque turbine and fixed connection. The turbine is lightweight, easy to clean.

**OPTIONAL**

**THALIA**

Turbine à spray unique et raccordement fixe. La turbine est légère, simple à nettoyer et avec couple très élevé.

**EN OPTION**

**THALIA**

Turbina con singolo spray e connessione fissa. La turbina è leggera, facile da pulire e dispone di una coppia di torsione elevata.

**OPZIONALE**



Set up for turbine with ON/OFF Speed adjustment.  
**OPTIONAL**

Prédisposition pour turbine avec réglage ON/OFF de la vitesse.  
**EN OPTION**

Tubo 4 vie per turbina o motore ad aria (escluso strumento); chip blower; getto antigoccia; controllo ON/OFF della velocità.

**OPZIONALE**



Set up for turbine with progressive speed adjustment.  
**OPTIONAL**

Prédisposition pour turbine avec réglage progressive de la vitesse.  
**EN OPTION**

Tubo 4 vie per turbina o motore ad aria (escluso strumento); chip blower; getto antigoccia; controllo progressivo della velocità.

**OPZIONALE**



Set up for turbine with progressive speed adjustment with LED.  
**OPTIONAL**

Prédisposition pour turbine avec réglage progressive de la vitesse avec LED.  
**EN OPTION**

Tubo 4 vie per turbina o motore ad aria (escluso strumento); chip blower; getto antigoccia; controllo progressivo della velocità; fibre ottiche.

**OPZIONALE**

code	description
9210243 (C)	ON/OFF TURBINE SET
9210503 (E)	ON/OFF TURBINE SET

code	description
9210244 (C)	PROGRESSIVE TURBINE SET
9210504 (E)	PROGRESSIVE TURBINE SET

code	description
9210245 (C)	PROGRESSIVE TURBINE SET WITH FO
9210505 (E)	PROGRESSIVE TURBINE SET WITH FO



code	description
3670136	POLARIS

**POLARIS**

Light intensity: 8.000-35.000 lux  
 Colour temperature: from 4.200° K to 6.000 ° K  
**OPTIONAL**

**POLARIS**

*Intensité lumineuse:* 8.000-35.000 lux  
*Température de couleur:* de 4.200 K à 6.000 ° K  
**EN OPTION**

**POLARIS**

Intensità luminosa: 8.000-35.000 lux  
 Temperatura di colore: da 4200k a 6000 ° K  
**OPZIONALE**



code	description
3620118	MP 3020

**MP 3020**

Light intensity: 3.000 to 40.000 lux  
 Colour temperature: 5.000 ° K  
**OPTIONAL**

**MP 3020**

*Intensité lumineuse:* 3.000 à 40.000 lux  
*Température de couleur:* 5.000 ° K  
**EN OPTION**

**MP 3020**

Intensità luminosa: 3.000 à 40.000 lux  
 Temperatura di colore: 5.000 °K  
**OPZIONALE**



code	description
9210265	ISA

**ISA**


Light intensity: 15.000-30.000 lux  
 Colour temperature: 5.000 ° K  
**OPTIONAL**

**ISA**

*Intensité lumineuse* 15.000-30.000 lux T  
*Température de couleur:* 5.000 ° K  
**EN OPTION**

**ISA**

Intensità luminosa: 15.000-30.000 lux  
 Temperatura di colore: 5.000 °K  
**OPZIONALE**

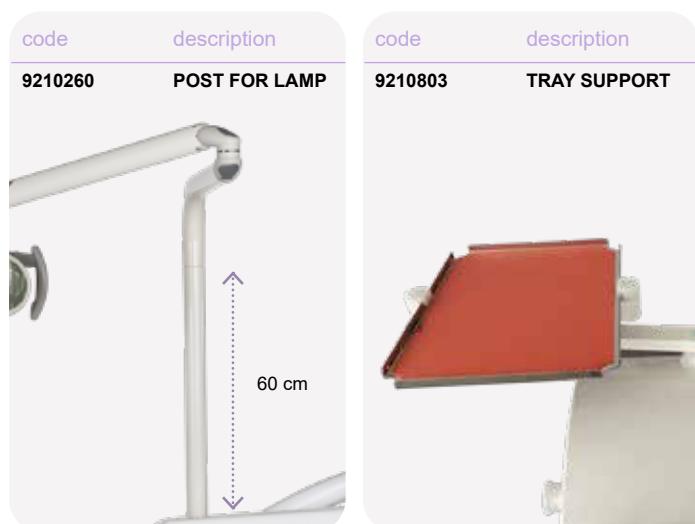

Post for lamp.  
 60 cm lenght.  
**OPTIONAL**

*Colonne pour éclairage.*  
*Longeur 60 cm*  
**EN OPTION**

Braccio supporto lampada di 60cm.  
**OPZIONALE**

Instruments tray support.  
**OPTIONAL**

Support pour plateau des instruments.  
**EN OPTION**

Supporto per vassoio porta strumenti.  
**OPZIONALE**



LAMPS DATA SHEET  
 ON PAGE 126-128