



3 MOTION

3MOTION is the brand new range of operating chairs conceived to meet the needs of the most demanding Professionals. The innovative design combined with the elegant and harmonious lines, guarantee a pleasant working environment for both the Patient and the Operator.

3MOTION chairs are developed and manufactured according to the highest quality standards. Anti-shock safety system electronically set the lift, tilt and back-rest movements, allowing the Operator to use the chair even in a small working environment operating a wire-less pedal.

The maximum leg-rest height can be adjusted up to 145cm, allowing the Operator to work in standing position. The electrically activated movements of lift, tilt and back-rest guarantee a perfectly ergonomical use of the 3MOTION chair.

The chair (R version) can smoothly rotate 115 degrees left and right and is equipped with a foot locking system for a perfect positioning of the Patient.

Lifting capacity of the Chair is 225 kg.

3MOTION est la nouvelle gamme de fauteuils conçue pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants. Le design innovant combiné avec les lignes élégantes et harmonieuses, garantissent un environnement de travail agréable pour le patient ainsi que pour l'Opérateur.

Les fauteuils **3MOTION** sont développées et fabriquées suivant les plus haut standards de qualité. Le système de sécurité anti-chocs permet de régler électroniquement les mouvements de montée/descente, de l'inclinaison et du dossier, permettant à l'opérateur d'utiliser le fauteuil même dans des espaces de travail réduits avec une pédale sans fil. La hauteur maximale des jambières peut atteindre jusqu'à 145 cm, ce qui permet à l'opérateur de travailler debout. Les mouvements de montée/descente, inclinaison et du dossier activés électriquement, garantissent une utilisation parfaitement ergonomique de la gamme **3MOTION** dans toutes les zones du traitement de soin. Le fauteuil (en version R) peut pivoter en douceur de 115 degrés à gauche et à droite, et est équipé d'un système de blocage par levier pour un positionnement parfait du patient.

Capacité de levage 225 kg.

3MOTION è la gamma di poltrone Podologiche ideata per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti. Il design, con linee eleganti e armoniose, garantisce un ambiente di lavoro piacevole sia per il Paziente che per l'Operatore.

Le poltrone **3MOTION** sono concepite e fabbricate secondo i più alti standard di qualità. Il sistema anti-shock è gestito elettronicamente e consente una movimentazione in sicurezza della poltrona in fase di salita e discesa, di inclinazione e dello schienale, garantendo all'Operatore di gestire la totalità dei movimenti tramite un pedale wireless. L'altezza massima dei gambali può raggiungere i 145 cm, permettendo all'Operatore di lavorare anche in piedi. I movimenti di salita e discesa, dello schienale e dell'inclinazione sono attivati elettricamente e garantiscono un utilizzo perfettamente ergonomico della gamma **3MOTION** in tutte le aree del trattamento. La **3MOTION** (in versione R) può ruotare di 115° a sinistra e a destra, ed è dotata di un sistema di bloccaggio a leva per un perfetto posizionamento del Paziente.

La capacità di sollevamento è di 225 kg.



3 MOTION



Innovative Medical Solutions



80 colours available

code	description
9110157	3MOTION R (with rotation)
9110157-GUE	3MOTION R (electric single leg-rest)
9110157-GU	3MOTION R (manual single leg-rest)
9110157-GS	3MOTION R (splitted double leg-rest)
9110156	3MOTION F (fixed - without rotation)
9110156-GUE	3MOTION F (electric single leg-rest)
9110156-GU	3MOTION F (manual single leg-rest)
9110156-GS	3MOTION F (splitted double leg-rest)

LEGREST SPECS
MORE INFO ON PAGE 22-23



memory



plug & work



disinfection



zero position



3 motors





Zero position of the chair.

3MOTION chair automatically reaches "0" position to facilitate the access and the exit of the Patient.

Remise à zéro du fauteuil. Le fauteuil atteind la position "0" automatiquement pour faciliter l'accès et la descente du Patient.

Ritorno a zero. La poltrona raggiunge automaticamente la posizione "0" per facilitare l'accesso e la discesa del Paziente.



3MOTION chair reaches the height of 145 cm at maximum leg-rest extension.

Le fauteuil atteind la hauteur maximale de 145 cm avec l'axe des jambières allongés.

La poltrona raggiunge un'altezza massima di 145 cm con massima estensione del gambale.



3MOTION chair can horizontally rotate 230 °. The lever allows the Operator to rotate and stop the rotation of the chair. The lever gives the Operator the opportunity to friction the rotation movement.

PROVIDED ONLY IN THE "R" VERSION

La rotation du fauteuil suive un mouvement mechanique horizontale de 230 °. Le levier positionné en bas du fauteuil permet à l'Opérateur de frictionner ou d'arrêter la rotation du fauteuil.

FOURNIE DANS LA VERSION "R"

La rotazione della poltrona segue un movimento meccanico orizzontale di 230°. La leva posizionata nella parte inferiore della poltrona consente all'Operatore di frizionare o bloccare la rotazione.

FORNITO SOLO NELLA VERSIONE "R"



3MOTION chair can reach a perfect flat position at any height, for the maximum comfort of the Operator while performing a clinical examination or professional treatment. Maximum height 95 cm.

Le fauteuil 3MOTION peut atteindre une position parfaitement plate à n'importe quelle hauteur, pour le maximum de confort pour l'opérateur lors d'un examen ou un traitement professionnel.

Hauteur maximum 95 cm.

3MOTION raggiunge la posizione di lettino perfetta ed a qualsiasi altezza, per garantire il massimo comfort per l'Operatore durante l'esame o il trattamento professionale. Altezza massima 95 cm.



Synchronized collapseable padded arm-rests for easy access of the patient.
Always parallel with the seat.

PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

*Accoudoirs rembourrés et synchronisés pour un accès facilité du patient.
Toujours parallèles à l'assise.*

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Braccioli imbottiti e sincronizzati per un accesso facilitato del Paziente.
Sempre parallelo alla seduta.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



Anatomical adjustable head-rest for Patient's maximum comfort.
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

*Anatomical adjustable head-rest for Patient's maximum comfort.
FOURNI DANS LA VERSION STANDARD*

Poggiatesta anatomico regolabile per il massimo comfort del Paziente.
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



Cushioning elements for flat position of the Chair. Cushioning set between back-rest and seat, and between seat and leg-rest.

OPTIONAL

Kit pour position à plat du fauteuil. Éléments de rembourrage entre le dossier et le siège et entre le siège et les jambières.

EN OPTION

Kit per completare la posizione a lettino della poltrona. Elementi di imbottitura tra lo schienale e il sedile e tra il sedile e i gamba.

OPZIONALE



MEMOREX padding in viscoelastic material.
OPTIONAL

*Matériel visco-élastique MOUSSE DE MÈMOIRE.
EN OPTION*

Materiale viscoelastico in schiuma indeformabile per il massimo comfort del Paziente.

OPZIONALE



Standard leg-rest.

PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Jambière Standard.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Gambali Standard

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



Kit for application system of plastic kidney trays for leg-rest.


PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Kit augettes en plastique pour les jambières.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Kit vaschette in polipropilene da fissare ai gambali.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

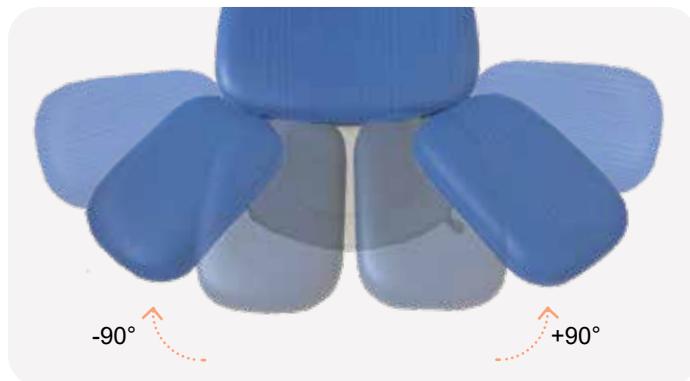

Telescopic leg-rest opening at 90° and performing a vertical movement of 90° adjustable by the handles on the sides.


PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Jambière télescopique écartant à 90° et effectuant un mouvement vertical de 90° réglable par le levier latérale.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Gambali telescopici divaricabili a 90° con movimento verticale di 90° regolabile dalla leva laterale.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

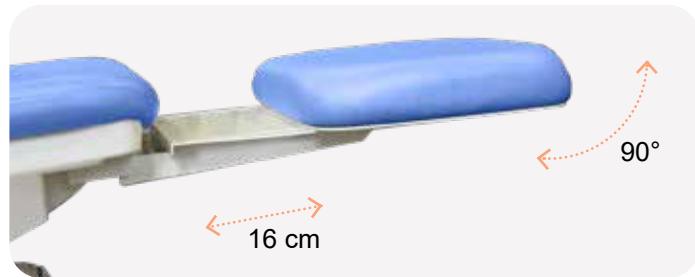

Single padded leg-rest. Manual handling by lever or electrically operated by a small actuator.

PROVIDED IN THE SINGLE LEG-REST VERSION or IN THE SINGLE ELECTRIC LEG-REST VERSION

Jambière unique rembourrée à manutention mécanique par levier ou rembourrée à mouvement électrique activé par l'actuateur.

FOURNI DANS LA VERSION AVEC JAMBIERE UNIQUE ou DANS LA VERSION AVEC JAMBIERE UNIQUE ÉLECTRIQUE

Gambale unico con movimento azionato da una leva meccanica o con movimento azionato da un attuatore lineare.

FORNITO NELLA VERSIONE CON GAMBALE UNICO o CON GAMBALE UNICO ELETTRICO



code description

3510138 FLEXIBLE FOOT TRAY

Flexible foot tray, rollable and unbreakable, comfortable for the patient.

OPTIONAL

Tray flexible, enroulable et incassable, confortable pour le patient.

EN OPTION

Vassoio flessibile ed infrangibile, comodo per il Paziente.

OPZIONALE



The leg-rest can stretch 20 cm on its support axis.

PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

La jambière peut s'étirer de 20 cm sur son axe de support.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Il gambale è estensibile fino a 20 cm sul suo asse di supporto.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



Double splitted leg-rests manually operated by lever and provided with stainless steel internal supports. Precise and comfortable positioning of the Client's foot able to provide a perfect and complete view of the treatment area.

PROVIDED IN THE DOUBLE SPLITTED LEG-REST VERSION

Jambière doubles réglées manuellement, équipées de supports en acier. Positionnement précis et confortable du pied du client capable de fournir une vue parfaite et complète de la zone de traitement.

FOURNI DANS LA VERSION AVEC JAMBIERE DOUBLES

Gambale sdoppiato regolato manualmente, dotato di supporti in acciaio Inox. Posizionamento preciso e confortevole del piede del Paziente in grado di fornire una visuale perfetta e completa dell'area di trattamento.

FORNITO NELLA VERSIONE A GAMBALI SDOPPIATI

code	description
9110235	LEG-REST COVER

Washable cover for standard leg support.

OPTIONAL

Couverture lavable pour jambière standard.

EN OPTION

Coprigambale lavabile
OPZIONALE

code	description
9110243	DOUBLE LEG-REST COVER

Washable cover for leg support with heel support

OPTIONAL

Couverture lavable pour jambière avec support talon

EN OPTION

Coprigambale per gambali sdoppiati lavabile
OPZIONALE

3MOTION is operated by a foot control (wireless option available) with modern design and extremely intuitive.

Easy to operate and to clean, the foot control provides the Professional with an ergonomic and efficient working tool, useful to position the Patient comfortably and memorize different working or safety positions.

The foot control has 6 buttons to operate the 3 actuators and move the Chair sections ; it is also provided with 3 memorizable positions buttons (M1,M2,M3) and the easy Patient Access-Exit position (M0).

PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Wireless foot control.

OPTIONAL


3MOTION est équipé d'une commande au pied (option sans fil disponible) avec un design moderne, aux fonctions simples et intuitives.

Facile à utiliser et à désinfecter, la pédale garantit au Professionnel un outil de travail ergonomique et efficace, idéal pour positionner confortablement le patient et mémoriser différentes positions de travail ou de sécurité.

La pédale a 6 touches activant les 3 moteurs permettent le mouvement des différentes sections du fauteuil; La commande au pied est équipé de 3 touches de position mémorisées (M1, M2, M3) et de la touche mémoire "0" pour un accès et une sortie aisés du patient.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD


M0

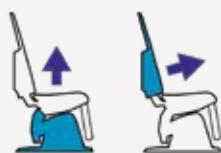

M1



M2

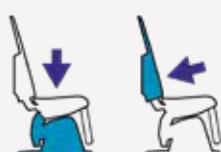

M3

Pédale au pied sans fil.

EN OPTION

3MOTION è dotata di un comando a pedale (opzione wireless disponibile) dal design moderno, con funzioni semplici ed intuitive.

Facile da disinfeccare, rappresenta per il professionista uno strumento di lavoro ergonomico ed efficace, ideale per posizionare comodamente il paziente anche attraverso la memorizzazione di diverse posizioni di lavoro o di sicurezza. La pedaliera a 6 tasti attiva i 3 motori consentendo il movimento armonico della poltrona; Il comando a pedale è dotato di 3 tasti per le posizioni memorizzabili (M1, M2, M3) e il tasto di memoria "0" per l'accesso e l'uscita facilitata del Paziente.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

Pedale wireless.

OPZIONALE