



2 MOTION

Specifically conceived for the most demanding professional Operators, **2MOTION** is the recent result of BTC Research & Development Department. Ergonomic and functionality satisfies Podiatrists' needs of high performance and maximum comfort for the Patient.

Main features:

- 2 Linak linear actuators operating electrically and independently the lifting and tilting movements of the Chair
- **2MOTION** Chair can reach Trendelenburg position
- Adjustable back rest with gas pump
- Collapsible arm-rests
- Extendable Leg-rests
- Rotation of 115 ° right and 115 ° left with foot lever for fractioning and controlled locking function
- Flat position at any height
- "Zero" resting position for easy entry/exit of the Patient
- Lifting capacity 225 kg

*Spécialement conçu pour les Opérateurs professionnels les plus exigeants, **2MOTION** est le résultat récent du département Recherche & Développement de BTC. L'ergonomie et la fonctionnalité répondent aux besoins des Podologues en matière de haute performance et de confort maximum pour le patient.*

Caractéristiques principales:

- 2 moteurs Linak gérant électriquement et séparément les mouvements de montée/descente et inclinaison
- Le fauteuil peut atteindre la position Trendelenburg
- Dossier réglable avec vérin à gaz.
- Accoudoirs amovibles
- Jambières extensibles
- Rotation de 115 ° à droite et à gauche avec dispositif de blocage par levier
- Position plate à n'importe quelle hauteur
- Position "Zéro" pour faciliter l'entrée-sortie du patient
- Capacité de levage 225 kg.

Appositamente concepito per gli operatori professionali più esigenti, **2MOTION** è il nuovo progetto di Poltrona Podologica sviluppato del Reparto di Ricerca e Sviluppo BTC. Ergonomia e funzionalità soddisfano le esigenze del Podologo assicurando alte prestazioni e massimo comfort per il Paziente.

Caratteristiche principali:

- 2 attuatori Linak per gestire elettricamente e in modo indipendente i movimenti di salita / discesa e inclinazione
- La poltrona può raggiungere la posizione di Trendelenburg
- Movimento dello schienale regolabile tramite molla a gas.
- Braccioli ribaltabili a fissaggio dorsale
- Gambali telescopici
- Rotazione di 115 ° a destra e sinistra con blocco a leva
- Posizione lettino a qualsiasi altezza
- Posizione "zero" per facilitare l'accesso del Paziente
- Capacità di sollevamento: 225 kg

2 MOTION

BTC
Medical Equipment

Innovative Medical Solutions



80 colours available

code	description
9110339	2MOTION R (with rotation)
9110339-GUE	2MOTION R (electric single leg-rest)
9110339-GU	2MOTION R (manual single leg-rest)
9110339-GS	2MOTION R (splitted double leg-rest)
9110336	2MOTION F (fixed - without rotation)
9110336-GUE	2MOTION F (electric single leg-rest)
9110336-GU	2MOTION F (manual single leg-rest)
9110336-GS	2MOTION F (splitted double leg-rest)



LEGREST SPECS
MORE INFO ON
PAGE 28-29



memorie



plug & work



disinfezione



ritorno a zero



2 motori






Zero position of the chair.

2MOTION chair automatically reaches "0" position to facilitate the access and the exit of the Patient.

Remise à zéro du fauteuil. Le fauteuil atteind la position "0" automatiquement pour faciliter l'accès et la descente du Patient.


Ritorno a zero. La poltrona raggiunge automaticamente la posizione "0" per facilitare l'accesso e la discesa del Paziente.

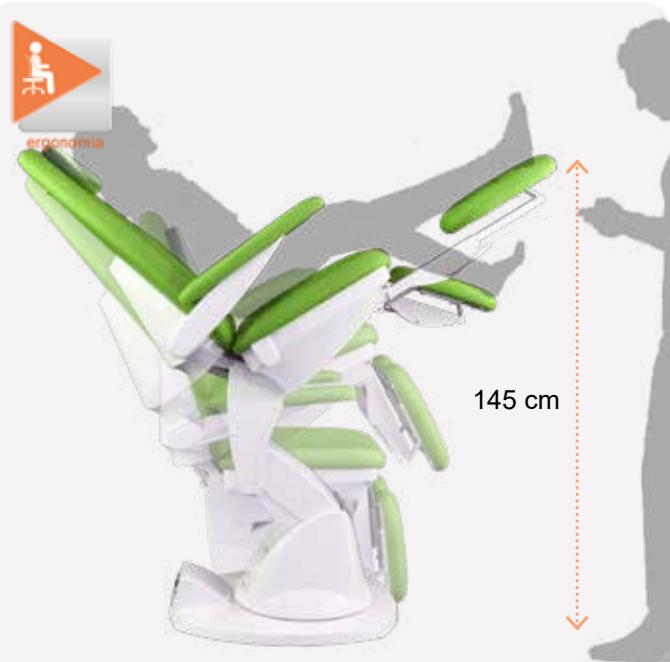

2MOTION chair reaches the height of 145 cm at maximum leg-rest extension.

Le fauteuil atteind la hauteur maximale de 145 cm avec l'axe des jambières allongés.

La poltrona raggiunge un'altezza massima di 145 cm con massima estensione del gambale.

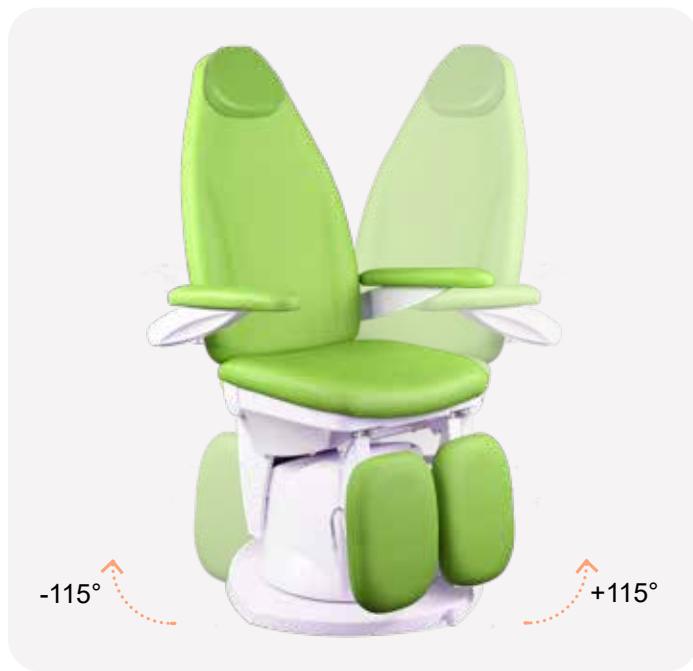

2MOTION chair can horizontally rotate 230 °

The lever allows the Operator to rotate and stop the rotation of the chair. The lever gives the Operator the opportunity to friction the rotation movement.

PROVIDED ONLY IN THE "R" VERSION

La rotation du fauteuil suit un mouvement mécanique horizontale de 230 °. Le levier positionné en bas du fauteuil permet à l'Opérateur de frictionner ou d'arrêter la rotation du fauteuil.

FOURNIE DANS LA VERSION "R"

La rotazione della poltrona segue un movimento meccanico orizzontale di 230°. La leva posizionata nella parte inferiore della poltrona consente all'Operatore di frizionare o bloccare la rotazione.

FORNITO SOLO NELLA VERSIONE "R"



2MOTION chair can reach a perfect flat position at any height, for the maximum comfort of the Operator while performing a clinical examination or professional treatment. Maximum height 95 cm.

Le fauteuil 2MOTION peut atteindre une position parfaitement plate à n'importe quelle hauteur, pour le maximum de confort pour l'opérateur lors d'un examen ou un traitement professionnel. Hauteur maximum 95 cm.

2MOTION raggiunge la posizione di lettino perfetta ed a qualsiasi altezza, per garantire il massimo comfort per l'Operatore durante l'esame o il trattamento professionale. Altezza massima 95 cm.



Synchronized collapseable padded arm-rests for easy access of the patient.
Always parallel with the seat.


PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

*Accoudoirs rembourrés et synchronisés pour un accès facilité du patient.
Toujours parallèles à l'assise.*

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Braccioli imbottiti e sincronizzati per un accesso facilitato del Paziente.
Sempre parallelo alla seduta.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

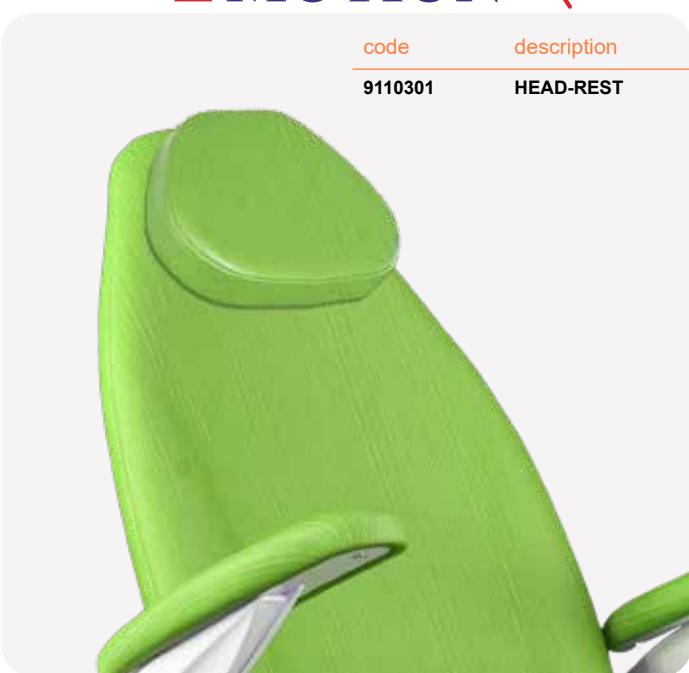

Anatomical adjustable head-rest for Patient's maximum comfort.
OPTIONAL

*Anatomical adjustable head-rest for Patient's maximum comfort.
EN OPTION*

Poggiatesta anatomico regolabile per il massimo comfort del Paziente.
OPZIONALE



Cushioning elements for flat position of the Chair. Cushioning set between back-rest and seat, and between seat and leg-rest.

OPTIONAL

Kit pour position à plat du fauteuil. Éléments de rembourrage entre le dossier et le siège et entre le siège et les jambières.

EN OPTION

Kit per completare la posizione a lettino della poltrona. Elementi di imbottitura tra lo schienale e il sedile e tra il sedile e i gamba.

OPZIONALE



code 9110421 **description** KIT FOR FLAT POSITION

MEMOREX padding in viscoelastic material.
OPTIONAL

*Matériel visco-élastique MOUSSE DE MÈMOIRE.
EN OPTION*

Materiale viscoelastico in schiuma indeformabile per il massimo comfort del Paziente.

OPZIONALE



Standard leg-rest.

PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Jambière Standard.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Gambali Standard

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



Kit for application system of plastic kidney trays for leg-rest.

PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Kit augettes en plastique pour les jambières.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Kit vaschette in polipropilene da fissare ai gambali.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



Telescopic leg-rest opening at 90° and performing a vertical movement of 90° adjustable by the handles on the sides.


PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Jambière télescopique écartant à 90° et effectuant un mouvement vertical de 90° réglable par le levier latérale.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Gambali telescopici divaricabili a 90° con movimento verticale di 90° regolabile dalla leva laterale.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

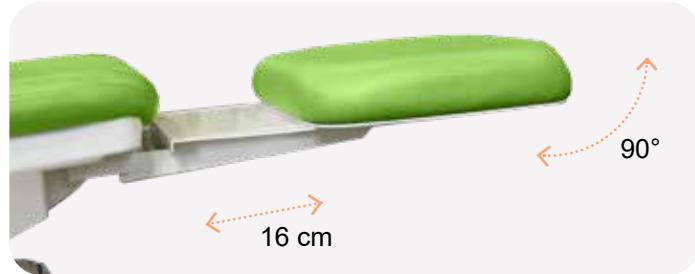

Single padded leg-rest. Manual handling by lever or electrically operated by a small actuator.

PROVIDED IN THE SINGLE LEG-REST VERSION or IN THE SINGLE ELECTRIC LEG-REST VERSION

Jambière unique rembourrée à manutention mécanique par levier ou rembourrée à mouvement électrique activé par l'actuateur.

FOURNI DANS LA VERSION AVEC JAMBIERE UNIQUE ou DANS LA VERSION AVEC JAMBIERE UNIQUE ÉLECTRIQUE

Gambale unico con movimento azionato da una leva meccanica o con movimento azionato da un attuatore lineare.

FORNITO NELLA VERSIONE CON GAMBALE UNICO o CON GAMBALE UNICO ELETTRICO



Flexible foot tray, rollable and unbreakable, comfortable for the patient.

OPTIONAL

Tray flexible, enroulable et incassable, confortable pour le patient.

EN OPTION

Vassoio flessibile ed infrangibile, comodo per il Paziente.

OPZIONALE

code	description
3510138	FLEXIBLE FOOT TRAY



The leg-rest can stretch 20 cm on its support axis.

PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

La jambière peut s'étirer de 20 cm sur son axe de support.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Il gambale è estensibile fino a 20 cm sul suo asse di supporto.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



Double splitted leg-rests manually operated by lever and provided with stainless steel internal supports. Precise and comfortable positioning of the Client's foot able to provide a perfect and complete view of the treatment area.


PROVIDED IN THE DOUBLE SPLITTED LEG-REST VERSION

Jambière doubles réglées manuellement, équipées de supports en acier. Positionnement précis et confortable du pied du client capable de fournir une vue parfaite et complète de la zone de traitement.

FOURNI DANS LA VERSION AVEC JAMBIERE DOUBLES

Gambale sdoppiato regolato manualmente, dotato di supporti in acciaio Inox. Posizionamento preciso e confortevole del piede del Paziente in grado di fornire una visuale perfetta e completa dell'area di trattamento.

FORNITO NELLA VERSIONE A GAMBALI SDOPPIATI

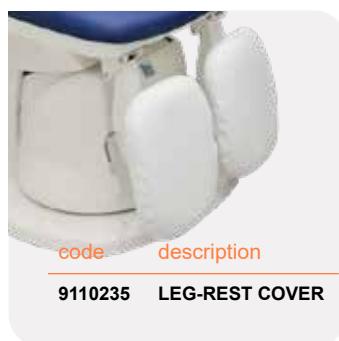

Washable cover for standard leg support.
OPTIONAL

Couverture lavable pour jambière standard.
EN OPTION

Coprigambale lavabile
OPZIONALE

code description
9110235 LEG-REST COVER



Washable cover for leg support with heel support
OPTIONAL

Couverture lavable pour jambière avec support talon
EN OPTION

Coprigambale per gambali sdoppiati lavabile
OPZIONALE

code description
9110243 DOUBLE LEG-REST COVER



code description
9110132 WIRELESS FOOT-CONTROL

Foot control

BTC foot control provided with 1 memorized working positions M0: zero position (entry/exit)

PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Pédale de commande

Pédale de commande BTC équipé avec 1 position mémorisé M0: remise à zéro.

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Pedale di comando

Comando a pedale BTC con Possibilità di una posizione memorizzata M0: Posizione "0"

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



code description
9110133 WIRELESS FOOT-CONTROL

Foot control

BTC foot control provided with 1 memorized working positions M0 (zero position entry/exit) and one memorizable position M1.

OPTIONAL

Pédale de commande

Pédale de commande BTC équipé avec 1 position mémorisé M0 (remise à zéro) et 1 position mémorisable M1.

EN OPTION

Pedale di comando

Comando a pedale BTC con Possibilità di una posizione memorizzata M0 (Posizione "0") e di una posizione memorizzabile M1.

OPZIONALE